
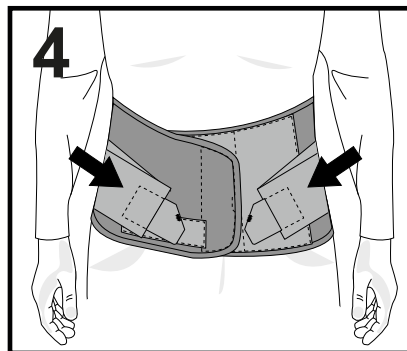
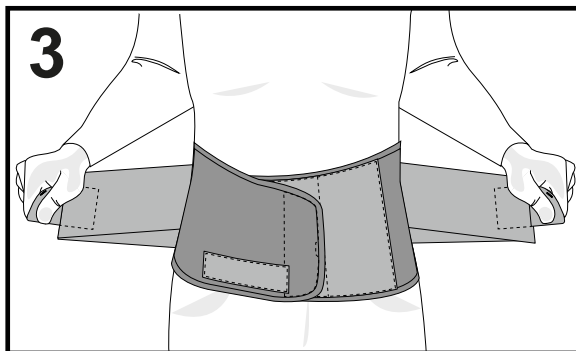
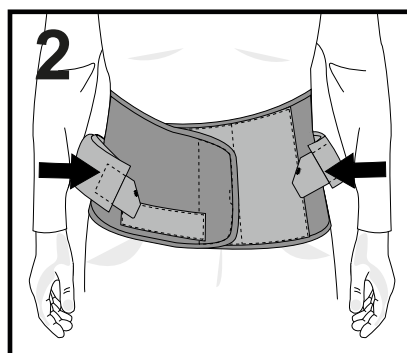
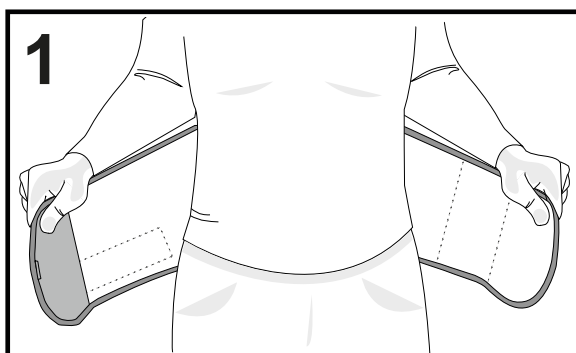


elements
body

TRIAL LUMBAR WRAP

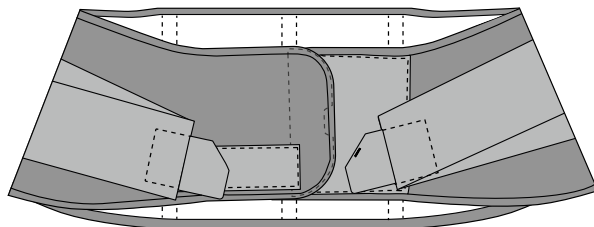

BRUKSANVISNING - BRUGERINSTRUKTION - USER INSTRUCTION
BRUKERVEJLEDNING - KÄYTTÖOHJEET

allard 

ENGLISH

Product description

Textile lumbar wrap with hook and loop adjustment in centre front and additional straps to provide support.

Intended Use & Indications

The lumbar wrap is intended to be used for assessment purposes only, prior to the provision of Elements Body garment. The lumbar wrap is intended for short term use for a maximum of two weeks.

Contraindications

The lumbar wrap is intended to be used for assessment purposes only, prior to a the provision of an Elements Body garment.

Limitations

To be used for part of the day only, follow the prescribers' recommendation, but should not be worn longer than 8 hours per day. Usage should be two weeks or less per user

Cautions

- Should not be used damp
- Not flame retardant
- Check garment and skin daily before usage

Information

Any serious incident that may occur in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and / or patient is established.


Material Specifications

Polyester, Polyamide and Spandex. POM stays

Sustainability information:

Return the product to the prescriber at the end of the trial period.

Washing instructions

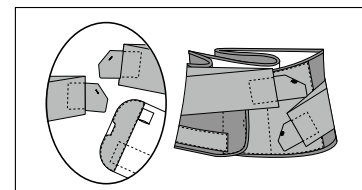

Close the hook and loop adjustment straps before washing.

SVENSKA

Produktbeskrivning

Textil korsett med kardborre justering mitt fram och extra band för att ge mer ländryggsstabilitet.

Avsedd användning / indikationer

Produkten är endast avsedd att användas i utvärderingssyfte inför en eventuell beställning av Elements Body. Produkten ska endast användas i utvärderingssyfte, som längst under två veckor och utgör ett användbart verktyg för utprovare/förskrivare. Korsetten ska provas ut av medicinsk personal och utprovaren ska säkerställa att vårdgivaren förstår hur användning ska gå till.

Kontraindikationer

Produkten är endast avsedd att användas i utvärderingssyfte inför en eventuell beställning av Elements Body.

Begränsningar

Ska endast användas under en del av dagen, enligt förskrivarens rekommendation, men inte längre än 8 timmar. Ska inte användas längre än två veckor.

Varningar

- Bör ej användas fuktig
- Ej flamskyddsbehandlad
- Kontrollera plagg och hud dagligen innan användning.

Information

Eventuella allvarliga incidenter som har inträffat i samband med produkten bör rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten i den medlemsstat där användaren och/eller patienten är etablerad.


Materialspecifikation

Polyester, Polyamid och Spandex. POM skenor

Hållbarhetsinformation

Återlämna produkten till utprovaren efter prövtidens slut.

Tvättinstruktioner

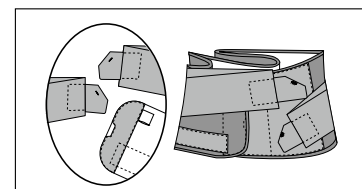

Fäst alla kardborreband i materialet före tvätt.

NORSK

Produktbeskrivelse

Lumbarbelte i tekstil med borrelåjustering i front og ekstra bånd for mer støtte i korsryggen.

Tiltenkt bruk

Produktet er tenkt å brukes kun til vurdering i forkant av en mulig bestilling av Elements Body. Produktet er kun for bruk til vurdering i maksimum to uker, og skal være et verktøy for utprøver/fore-skriver. Produktet skal tilpasses av medisinsk kyndig personale, og utprøveren skal forsikre seg om at omsorgspersonen forstår hvordan det skal brukes.

Kontraindikasjoner

Lumbarbeltet er tenkt å brukes kun til vurdering i forkant av en mulig bestilling av Elements Body.

Begrensninger

Skal brukes kun deler av dagen i henhold til foreskrivers anbefaling, men ikke lenger enn 8 timer. Skal ikke brukes i mer enn to uker.

Advarsler

- Bør ikke benyttes fuktig
- Ikke behandlet med flammehindrende materiale
- Kontroller plagg og hud daglig før bruk

Informasjon

Enhver alvorlig hendelse som måtte oppstå med produktet skal rapporteres til produsent eller ansvarlig myndighet i det land bruker og/eller pasient er etablert.


Materialspesifikasjon

Polyester, Polyamid og Spandex. POM spiler:

Informasjon om bærekraft:

Returner produktet til foreskriver etter endt testperiode.

Vaskeanvisning

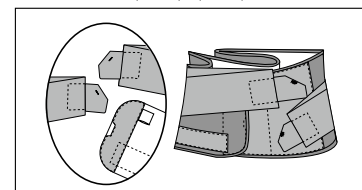

Lukk borrelåsen før vask.

DANSK

Produktbeskrivelse

Tekstilkorset med velcrojustering midt foran og ekstra stropper for at give mere stabilitet i lænden.

Tilsigtet anvendelse og indikationer

Produktet er kun beregnet til at blive brugt til evalueringsformål forud for en eventuel bestilling af Elements Body. Produktet bør kun anvendes til evalueringsformål, i højst to uger og udgør et nyttigt redskab for afprøveren.

Korsettet bør afprøves af medicinsk personale og skal sikre, at patienten forstår hvordan korsettet benyttes.

Kontraindikationer

Produktet er kun beregnet til at blive brugt til evalueringsformål forud for en eventuel bestilling Elements Body.

SUOMI

Tuotekuvaus

Tekstiilinen selkätuki, jossa on koukku- ja silmukkasäätö tuen keskiosassa sekä erilliset lisähihnat tuennan varmistamiseksi.

Käyttöalueet

Sovitus tukiliivi on tarkoitettu käytettäväksi arviointitarkoitukseen ennen mahdollista Elements Body tilausta. Sovitus tukiliivi on tarkoitettu lyhytaikaiseen käyttöön enintään kahden viikon ajan.

Vasta-aiheet

Sovitus tukiliivi on tarkoitettu käytettäväksi vain arviointitarkoitukseen ennen mahdollista Elements Body -kompressiovaatteen tilaamista.

Begrænsninger

Må kun anvendes en del af dagen i henhold til ordinerende fagpersonens anbefaling, men ikke mere end 8 timer dagligt. Anvend ikke mere end to uger.

Advarsler

- Bør ikke anvendes fugtig
- Ikke flammehæmmende
- Kontroller produktet og hud dagligt før brug

Information

Enhver alvorlig hændelse, der kan opstå i forbindelse med brug af produktet, bør indberettes til fabrikanten og den kompetente myndighed i det område, hvor brugeren og/eller patienten er tilhørende.

Rajoitukset

Käytetään vain osa-ajan päivästä lääkärin antamien suositusten mukaan, mutta enintään 8 tuntia. Käyttöaika on enintään kaksi viikkoa.

Huomioitavaa

- Ei tule käyttää kosteana
- Ei ole palonkestävä
- Tarkasta iho ja siihen asetettava tuki päivittäin ennen käyttöön ottoa.

Tietoa

Kaikista tukeen liittyvistä vakavista vaaratilanteista on ilmoitettava valmistajalle ja sen hyvinvointialueen toimivaltaiselle terveydenhuollon ammattilaiselle, johon käyttäjä ja/tai potilas on sijoittautunut.


Materiale specifikationer

Polyester, polyamid og spandex. POM hæfter

Oplysninger om bæredygtighed:

Returner produktet til den ordinerende fagperson efter prøveperiodens udløb.

Vaskeanvisning

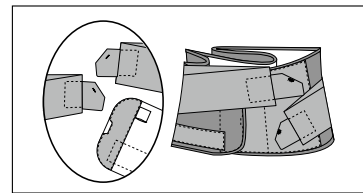

Luk velcro-stropper inden vask.


Materiaalin tekniset tiedot

Polyesteri, polyamidi ja elastaani. POM tukiluut.

Tietoa kestävydestä

Palauta tuote takaisin sovittajalle, kun kokeilujakso on päättynyt.

Pesuohteet

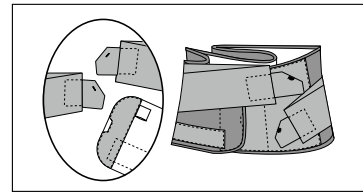

Sulje tarranauhakiinnikkeet ennen tuen pesemistä.

Support for Better Life!

MD



Camp Scandinavia AB, Karbingatan 38
SE-254 67 Helsingborg, Sweden
Phone: +46 42 25 27 01



Camp Scandinavia© MARCH_2023

allard|^I_T

www.allardint.com

Tel +46 42 25 27 00
Fax +46 42 25 27 25

ALLARD INTERNATIONAL

Camp Scandinavia AB
Karbingatan 38
SE-254 67 Helsingborg SWEDEN
info@allardint.com