

**CAMP**<sup>®</sup>



# CoverKIT<sup>™</sup> 2.0

Et nytt smart polstringsalternativ til Allard AFO  
passer til ToeOFF<sup>®</sup> 2.0 og BlueROCKER<sup>®</sup> 2.0

# Dere spurte - Vi lyttet!

En del brukere ønsker en sletttere overflate, andre ønsker jevnt trykk. Noen ønsker seg et mer diskret utseende. **CoverKIT™ 2.0 er løsningen!**

CoverKIT™ 2.0 er en smart løsning som gir en lav profil og holder ortose og polstring på plass uten bånd!



*Dra hele strømpen på benet opp til kneet.*



*Ta tak i den ytre delen ved den blå sømmen og dra opp det ytterste laget.*




*Om det er nødvendig, skal de to vertikale neoprenstavene monteres i ortosen nå. Sett ortosen i skoen, sett i foten og press deretter ortosen mot strømpen. Ta tak i den blå sømmen og dra strømpen over ortosen. For ekstra sikkerhet kan ortosens vanlige bånd også benyttes.*



- Smidig og slett utseende!
- Enkel å ta på og av - bare dra den på som en leggvarmer.
- Gir en smidig overflate som går hele veien ned til slutten av skinnen, noe som hjelper bukser å gli uten å feste seg i skinnen.
- Innsiden er et luftig friksjonsfritt materiale som sammen med utsiden gir en bra låseanordning av ortosen.
- Innsiden som er som en SoftKIT™ beskytter huden og holder skinnen på plass.
- CoverKIT™ leveres med to vertikale neoprenstaver som kan settes på ortosens innside for å skape en kanal uten trykk for å unngå trykk mot skinnbenet.
- Ortosens vanlige bånd kan brukes sammen med CoverKIT™.

Art.nr.	Størrelse	Omkrets legg
28765 0010	X-Small	31 - 34 cm
28765 0011	Small	34 - 37 cm
28765 0012	Medium	37 - 41 cm
28765 0013	Large	41 - 46 cm
28765 0014	X-Large	46 - 51 cm

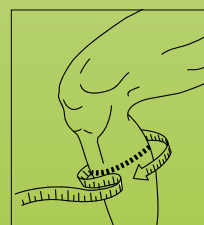

For mer informasjon om Allard AFO besøk [allardafo.com](http://allardafo.com)

Patent Pending