

# CAMP®

## kiddieGAIT® & kiddieROCKYER®

En dynamisk  
løsning for barn  
og ungdom



**En ortose-revolusjon...**

## kiddieGAIT®

**KiddieGAIT®** tilbyr en tidlig dynamisk ortosebehandling som kan bidra til at barnet får et jevnere og mer naturlig biomekanisk korrekt gangmønster. Ortosen hjelper barnet gjennom svingfasen, og kontrollerer fotens bevegelighet i flere plan gjennom støtfasen. Ortosens plassering på framsiden av tibia hjelper også til ved andre proksimale problemer, som f.eks. hyperekstensjon i kneet eller "Crouch"-gange.

**KiddieGAIT®** skal brukes i kombinasjon med en individuell fottilpassing for å kontrollere fotens posisjon.



## kiddieROCKER™

**KiddieROCKER®** er utviklet for å imøtekomme behovet hos barn med mer omfattende problemer enn droppfot. Akkurat som **KiddieGAIT®** er **KiddieROCKER®** dynamisk gradert mellom størrelsene. Gir også økt stabilitet i M/L og A/P-plan.



**KiddieGAIT®** og **KiddieROCKER®** skal brukes i kombinasjon med en individuell ortosetilpassing, f.eks. innlegg/SMO for å kontrollere fotens posisjon.



**...med mange dynamiske egenskaper!**

# Tilbehør og funksjoner


## Vinger og bånd

Ergonomisk designede "vinger"

- Formet for pasientkomfort og tilpasset passform

Borrelås på innsiden av "vingene"

- Borrelåsen fester seg ikke i klærne
- Lettere å holde fri for smuss
- Båndene festes på innsiden
- Minsker risikoen for å sette båndene på feil plass

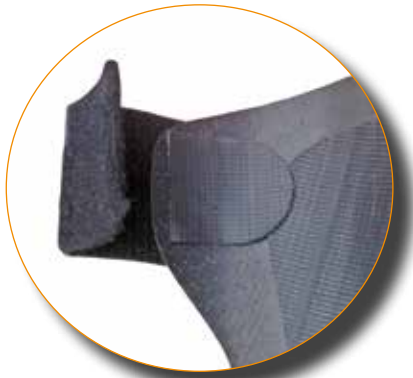

## Myk polstring

### comfortKIT™

En ny myk polstring til KiddieGAIT® og KiddieROCKER® som er spesielt egnet for pasienter med prominent tibia eller sensitiv hud, men også for de med høyt aktivitetsnivå. ComfortKIT™ har en indre kjerne av såkalt "memory foam" som gjør at den naturlig tilpasser seg benets form ved bruk. Når materialet hviler går det tilbake til sin opprinnelige form.



### softSHELL™

SoftSHELL™ er en polstring for KiddieGAIT® som kler inn hele ortosen. Innsiden er laget av samme materiale som SoftKIT™. Yttersiden består av et blankt mønstrete lycramateriale som forandrer utseendet. Det blanke materialet gjør at klær glir lettere mot ortosen. KiddieGAIT® SoftSHELL™ leveres komplett med polstring og bånd.





kiddieROCKER®



kiddieGAIT®



comfortKIT™



softSHELL™



Kiddie®GAIT		Kiddie®ROCKER		Størrelse	Høyde	Lengde Fotblad
Venstre	Høyre	Venstre	Høyre			
28372 1008	28372 2008	-	-	BabySmall	150 mm	110 mm
28372 1009	28372 2009	-	-	BabyMedium	180 mm	125 mm
28372 1010	28372 2010	-	-	BabyLarge	200 mm	140 mm
28900 1011	28900 2011	28902 1011	28902 2011	Small	220 mm	160 mm
28900 1012	28900 2012	28902 1012	28902 2012	Medium	257 mm	180 mm
28900 1013	28900 2013	28902 1013	28902 2013	Large	295 mm	200 mm
28900 1014	28900 2014	28902 1014	28902 2014	X-Large	315 mm	210 mm

ComfortKIT™	SoftKIT™	SoftSHELL™		Størrelse
		Piratmønster	Rosa hjerter	
28418 0011	28378 0011	28359 0011	28358 0011	Small
28418 0012	28378 0012	28359 0012	28358 0012	Medium
28418 0013	28378 0013	28359 0013	28358 0013	Large
28418 0014	28378 0014	28359 0014	28358 0014	X-Large

**CAMP**®  
SCANDINAVIA  
www.camp.se

SVERIGE  
Tel 042-25 27 01  
Fax 042-25 27 25  
info@camp.se

DANMARK  
43 96 66 99  
43 43 22 66  
info@camp.dk

FINLAND  
09-350 76 30  
09-350 76 338  
info@camp.fi

NORGE  
23 23 31 20  
23 23 31 21  
info@camp.no