


Carbon Footplate & Carbon Footplate Rigid



Carbon Footplate for støtte og stabilitet

Utviklet med nærmere tre tiårs erfaring med ankel- og fotortoser i karbonkompositt.

Vår kullfibersåle er autoklavert, lett og formet etter skoens silhuett for en komfortabel passform. Kullfibersålen bidrar til minimert smerte for pasienter med ulike stressfrakturer, skader eller artritt i fram- eller mellomfotsregionen. Carbon Footplate er tilgjengelig i to forskjellige versjoner, regulær og rigid, for at imødekomme individuelle behov.

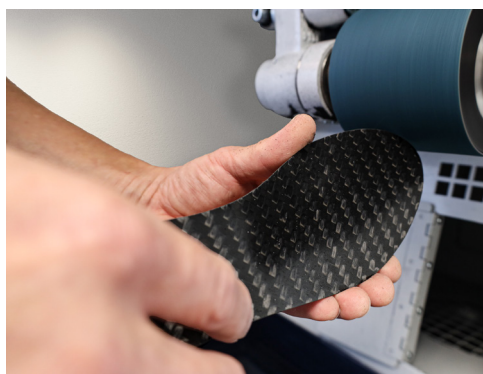

Bruk en båndsliper eller Dremel for å slipe og tilpasse Carbon Footplate. Følg alltid bruksanvisningen som følger med produktet når du tilpasser Carbon Footplate.

Artikkeloversikt

Art.nr.	Modell	Størrelse	Ve/Hø	Lengde	Bredde	Tykkelse
280351011	Carbon Footplate	Small	Venstre	235 mm	77 mm	1,8 mm
280351012	Carbon Footplate	Medium	Venstre	255 mm	80 mm	1,8 mm
280351013	Carbon Footplate	Large	Venstre	275 mm	90 mm	1,8 mm
280351014	Carbon Footplate	X-Large	Venstre	305 mm	99 mm	1,8 mm
280352011	Carbon Footplate	Small	Høyre	235 mm	77 mm	1,8 mm
280352012	Carbon Footplate	Medium	Høyre	255 mm	80 mm	1,8 mm
280352013	Carbon Footplate	Large	Høyre	275 mm	90 mm	1,8 mm
280352014	Carbon Footplate	X-Large	Høyre	305 mm	99 mm	1,8 mm
280361011	Carbon Footplate Rigid	Small	Venstre	235 mm	77 mm	2,0 mm
280361012	Carbon Footplate Rigid	Medium	Venstre	255 mm	80 mm	2,0 mm
280361013	Carbon Footplate Rigid	Large	Venstre	275 mm	90 mm	2,0 mm
280361014	Carbon Footplate Rigid	X-Large	Venstre	305 mm	99 mm	2,0 mm
280362011	Carbon Footplate Rigid	Small	Høyre	235 mm	77 mm	2,0 mm
280362012	Carbon Footplate Rigid	Medium	Høyre	255 mm	80 mm	2,0 mm
280362013	Carbon Footplate Rigid	Large	Høyre	275 mm	90 mm	2,0 mm
280362014	Carbon Footplate Rigid	X-Large	Høyre	305 mm	99 mm	2,0 mm

Komfortabel passform

Redusert smerte

Kullfibersålen beskytter MTP-leddene og framfoten ved å begrense ROM, fordele trykket i framfoten samt bidra til lettere avrulling. Sålen kan brukes for å øke bevegelsen gradvis etter immobiliserende behandling med en postoperativ sko eller walker. Den kan også forbedre balansen etter en tåamputasjon.

Carbon Footplate Rigid gir ekstra støtte og stabilitet der bevegelsesområdet i tåleddene må begrenses ytterligere. For pasienter med tåamputasjon bidrar sålen til bedre balanse og et mer effektivt fraspark i slutten av standfasen.

For best komfort og funksjon bør karbonfibersålen dekket med en innleggssåle.

Begrenser bevegelsesomfanget for å minske smerte.

Formet etter skoen for en behageligere passform.

Tilpasset for sko med 5 - 10 mm hælhøyde.



Support for Better Life

Everyone should be able to live their life to the fullest, regardless of their mobility challenges. With innovative solutions developed in close collaboration with healthcare professionals and patients, we strive to provide Support for Better Life.



Sverige
042-25 27 00
info@camp.se
camp.se

Danmark
43 96 66 99
info@camp.dk
camp.dk

Finland
09-350 76 30
info@camp.fi
camp.fi

Norge
23 23 31 20
info@camp.no
camp.no