



Patella

Patella er laget spesielt for å møte ulike typer av patella problemer som behøver behandling. Produktet på bildet har patellaputen plassert på lateralsiden. Lett stabiliserende modeller som har rustfrie spiralfjærer i sidene.

- Flyttbar patellapute med drag som enkelt kan justeres.
- Justerbar omkrets på lår og legg.
- Ekstra mykt og føyelig materiale i knehasen.
- Pådragsløgger i overkant.
- Silikonrand på innsiden som hindrer at ortosen glir ned.
- Formsydd patellaåpning.
- Gir utmerket kompresjon, forbedrer proprioepsjonen og øker blodgjennomstrømmingen i området.



Minor Wrap



Minor

Minor finnes i to versjoner, en tube og en "wrap around" modell som er helt åpen. Lett stabiliserende modeller som har rustfrie spiralfjærer i sidene.

- Justerbar omkrets på lår og legg.
- Ekstra mykt og føyelig materiale i knehasen.
- Pådragsløgger i overkant.
- Silikonrand på innsiden som hindrer at ortosen glir ned.
- Formsydd patellaåpning.
- Gir utmerket kompresjon, forbedrer proprioepsjonen og øker blodgjennomstrømmingen i området.

© Camp Scandinavia AB Juni 2012

SELECTION®

Tekstile kneortoser på en helt ny måte!




FEM funksjonelle modeller som dekker alle behov!

Utmerket passform

Den underliggende anatomiske strukturen har vært veiledende under design- og utviklingsarbeidet av SELECTION. Formen på patellaåpningen er laget for å passe den anatomiske formen på patella.


Det bakre nedre båndet er plassert for å gi best mulig grep. Derfor sitter det høyt opp på gastrocnemius. Dette forhindrer at ortosen glir ned.

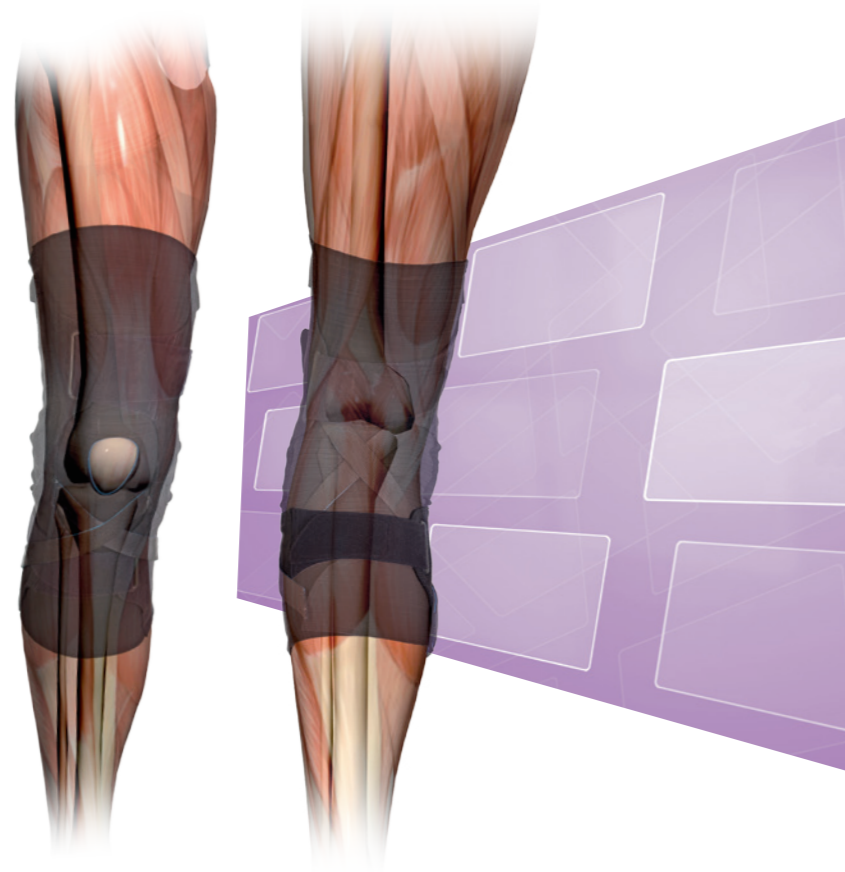

Optima

Enkelt for brukeren


Optima modellene (35702 og 35703) har begge flere ekstra funksjoner innebygd, noe som gir en fullkommen ortose med alle tenkelige funksjoner.

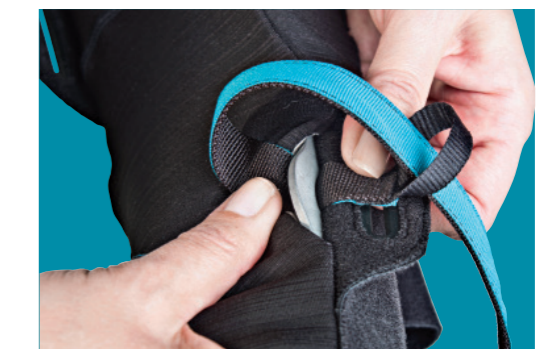

Leddene har innebygde hull slik at det er enkelt å feste overstrekkingsbåndet direkte på leddet, eller å fjerne det dersom det ikke er nødvendig. Overstrekkingsbåndet lukkes på lårets framside slik at det skal være smidig for brukeren å ta av og på ortosen og eventuelt regulere draget for overstrekkning.



Under patella er det to krysslagte bånd. De har som funksjon å gi økt stabilitet for kneleddet selv i A-P. Om ikke disse to båndene er nødvendig kan de enkelt klippes bort.

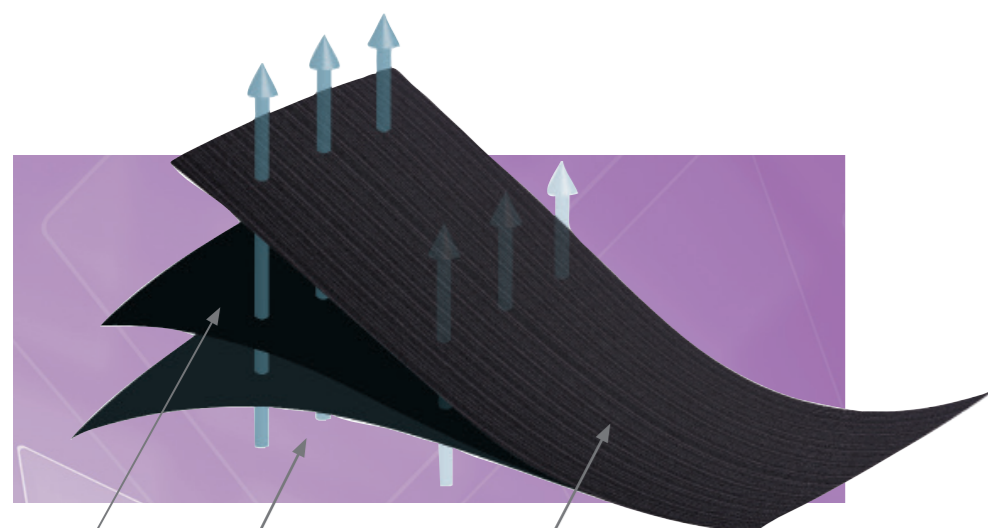

Mykt materiale mot huden. Glatt utside som får andre materialer til å gli lett mot overflaten. Ingen kantebånd nødvendig. Kan klippes uten at det frynser seg (35701).
Materialets funksjonsbærer hjelper materialet til å puste og transportere bort fuktighet.

Tilpasset funksjon


For SELECTION har vi valgt å arbeide med et annerledes materiale. Nytt, friskt og moderne i en kombinasjon som møter brukerens ønsker. SELECTION-materialet er tynt og smidig, tillater huden å puste og blir ikke så varmt. Borrelås-båndene og festeflatene er ekstra smidige for å gi en så lav bygghøyde som mulig. Fordi materialet ikke behøver kantebånd er det mulig å klippe i det uten at det frynser seg (35701).




Optima Wrap

Optima finnes i to versjoner, en tube og en "wrap around" modell som er helt åpen. Stabiliserende og avlastende kne-ortoser med justerbart ledd. Begge disse modellene har flere innebygde funksjoner, noe som øker bruksområdet. Enkelte funksjoner kan enkelt fjernes om de ikke er nødvendig.

- Avtagbart kryss for begrensning av overstrekkning.
- Stoppebånd for økt A-P stabilitet under patella.
- Ledd med justerbart bevegelsesomfang.
- Justerbar omkrets på lår og legg.
- Fire separate formsydd bånd med integrert D-ring.
- Ekstra mykt og føyelig materiale i knehasen.
- Pådragsløyker i overkant.
- Silikonrand på innsiden som hindrer at ortosen glir ned.
- Formsydd patellaåpning.
- Gir utmerket kompresjon, forbedrer proprioepsjonen og øker blodgjennomstrømmingen i området.

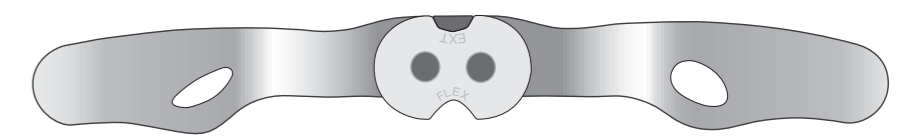

Optima-modellene leveres med et justerbart R.O.M. ledd. Leddet er noe bøyd ved leveranse for best mulig passform. Ulike innsatser for regulering av bevegelsesomfanget er inkludert. Ortoosen leveres med leddet stilt inn på 10° fleksjon.

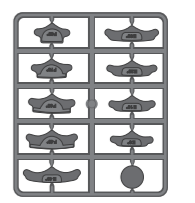

Optima